

Instrucciones de uso

Trulicity 1,5 mg solución inyectable en pluma precargada dulaglutida



TRULICITY PLUMA PRECARGADA

Por favor, antes de usar su pluma precargada, lea estas instrucciones de uso y la información para el paciente en el prospecto por completo y cuidadosamente. Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero sobre cómo inyectar Trulicity de forma adecuada.

- La pluma es un dispositivo de administración desechable y precargado que viene ya preparado para ser administrado. Cada pluma contiene una dosis semanal de Trulicity (1,5 mg). Cada pluma proporciona una sola dosis.
- **Trulicity se administra una vez a la semana.** Para recordar cuándo tiene que inyectarse la siguiente dosis, puede que quiera anotarlo en su calendario.
- Cuando presione el botón de inyección verde, la pluma introducirá la aguja **en su piel** automáticamente, inyectará el medicamento, y **una vez que la inyección se haya completado**, retirará hacia atrás la aguja (se retraerá).

ANTES DE EMPEZAR

Sacar

de la nevera.

Deje puesta la tapa de la base hasta que esté preparado para inyectarse.

Comprobar

la etiqueta para asegurarse de que es el medicamento correcto y que no está caducado.

Examinar


la pluma. No utilice este medicamento si observa que la pluma está deteriorada o el medicamento está turbio, tiene color o tiene partículas.

Preparar


lavándose las manos.

ELIJA SU LUGAR DE INYECCIÓN

- Su médico, farmacéutico o enfermero pueden ayudarle a elegir el mejor lugar de inyección para usted.
- Puede inyectarse el medicamento en la zona del abdomen o en el muslo.
- Otra persona puede inyectarle en la parte superior del brazo.
- Cambie (rote) el lugar de inyección cada semana. Puede elegir la misma zona de su cuerpo, pero asegúrese de que el lugar exacto de la inyección es diferente.

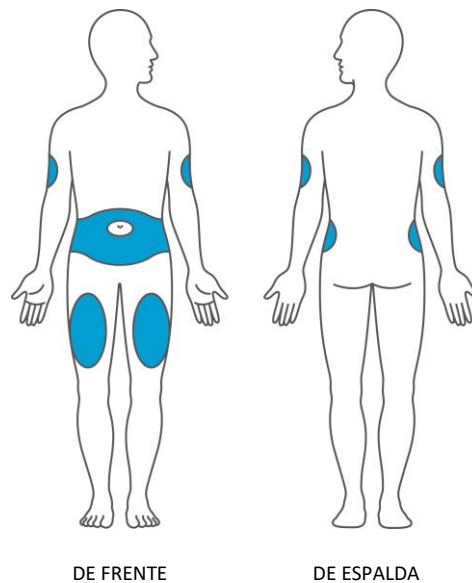

1. DESTAPAR
2. COLOCAR Y DESBLOQUEAR
3. PRESIONAR Y MANTENER

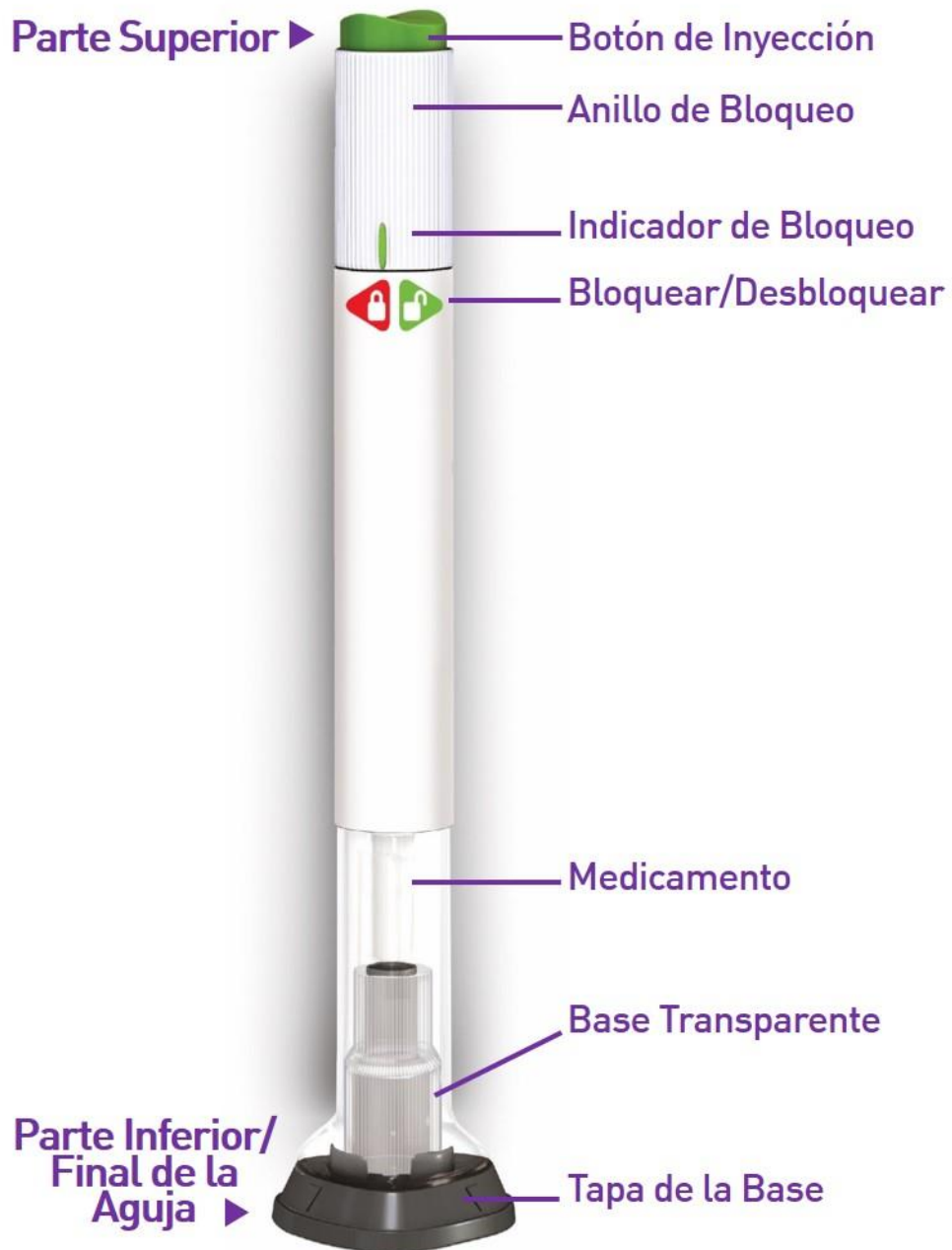

1 DESTAPAR

- Asegúrese de que la pluma está **bloqueada**.
- Retire la tapa de color gris de la base.

No vuelva a colocar la tapa de la base - esto podría dañar la aguja. No toque la aguja.

- Cuando se retira, la tapa gris de la base aparece como se muestra, y se puede desechar.




Si la tapa gris de la base no se parece a la imagen superior:

- No use la pluma.
- Guarde la pluma y la tapa de forma segura y contacte con Lilly.
- Utilice una nueva pluma.

2 COLOCAR Y DESBLOQUEAR

- Coloque la base transparente de forma plana, firmemente sobre su piel en el lugar de inyección.

- **Desbloquear** girando el anillo de bloqueo.

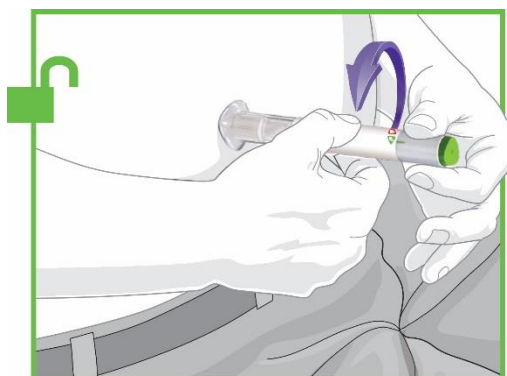

3 PRESIONAR Y MANTENER

- Presione y mantenga pulsado el botón de inyección verde; escuchará un clic alto.

- **⚠** Continúe sujetando la base transparente de forma firme sobre su piel hasta que escuche un segundo clic. Esto ocurrirá cuando la aguja comience a retraerse, en 5-10 segundos aproximadamente.
- Retire la pluma de la piel.



- Sabrá que la inyección ha terminado cuando la parte gris sea visible.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Conservación y Manipulación
Eliminación de la Pluma
Preguntas Frecuentes
Otra Información
Dónde Aprender Más

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

- La pluma contiene partes de vidrio. Manéjela con precaución. Si se le cae sobre una superficie dura, no la utilice. Use una nueva pluma para su inyección.
- Conserve su pluma en la nevera.
- Cuando no es posible almacenarla en nevera, puede mantener la pluma a temperatura ambiente (por debajo de 30°C) como máximo durante 14 días.
- No congele su pluma. Si la pluma se ha congelado, NO LA UTILICE.
- Mantenga la pluma en el envase original para protegerlo de la luz.
- Mantener la pluma fuera de la vista y del alcance de los niños.
- Lea la información para el paciente, para una obtener una información completa sobre una conservación adecuada.

ELIMINACIÓN DE LA PLUMA

- Tire la pluma en un contenedor de objetos punzantes o como le haya indicado su médico, farmacéutico o enfermero.
- No recicle el contenedor lleno de objetos punzantes.
- Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero como desechar los medicamentos que no va a usar más.



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué sucede si veo burbujas de aire en mi pluma?

Las burbujas de aire son normales. No le perjudicarán ni afectarán a su dosis.

¿Qué sucede si desbloqueo la pluma y pulso el botón de inyección verde antes de retirar la tapa de la base?

No retire la tapa de la base ni use la pluma. Deseche la pluma como le ha indicado su médico, farmacéutico o enfermero. Inyéctese su dosis utilizando otra pluma.

¿Qué sucede si hay una gota de líquido en la punta de la aguja cuando retiro la tapa de la base?

Una gota de líquido en la punta de la aguja no es extraño y no afectará a su dosis.

¿Necesito mantener el botón de inyección pulsado hasta que la inyección finalice?

No es necesario, pero puede ayudarle a mantener la pluma estable y firme sobre su piel.

Escuché más de dos clics durante la inyección - dos clics altos y uno bajo. ¿La inyección ha terminado?

Algunos pacientes pueden escuchar un clic bajo justo antes del segundo clic alto. Esto es por el funcionamiento normal de la pluma. No retire la pluma de su piel hasta que no escuche el segundo clic más alto.

¿Qué sucede si hay una gota de líquido o sangre en mi piel tras la inyección?

Esto no es extraño y no afectará a su dosis.

No estoy seguro de si mi pluma ha funcionado correctamente.

Compruebe si ha recibido su dosis. La dosis se ha administrado correctamente si la parte gris es visible (ver paso 3). También puede contactar con su oficina local de Lilly que figura en la Información para el paciente para información adicional. Hasta entonces, conserve su pluma de forma segura para evitar una herida por un pinchazo accidental con la aguja.

OTRA INFORMACIÓN

- Si tiene problemas de visión, NO use su pluma sin ayuda de otra persona entrenada en el uso de la pluma de Trulicity.

DÓNDE APRENDER MÁS

- Si tiene alguna pregunta o problema con su pluma de Trulicity, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.

CÓDIGO
QR

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA ACCEDER
www.trulicity.eu

Última revisión en enero 2021